

VIBRACIONA MEDICINA

TESLA JE PRVI UOČIO BLAGOTVORNO DEJSTVO ELEKTRICITETA NA ZDRAVLJE I SKRENUO LEKARIMA PAŽNJU NA ISCELJITELJSKU MOĆ VISOKOFREKVENTNIH ZRAČENJA



Medicina budućnosti biće posvećena ispitivanju uticaja energetskih vibracija na ljudski organizam –

Prof. Dr. William Tiller dobitnik Nobelove nagrade, kvantni fizičar sa Stenford Univerziteta

MAGIC-GEN electrostimulation

Aparat pomaže u sprečavanju nastanka jakih i hroničnih bolova usled reume, išijasa, tendinitisa, artritisa, neuralgija, slabe cirkulacije...

MAGIC-GEN pripada novoj generaciji aparata na principu talasne genetike za lečenje bolnih problema. U cilju potpomaganja regeneracije oštećenih delova na ćelijana tj. genima, elektromagnetni talasi generisani u ovom aparatu ispoljavaju svoje dejstvo na subćelijaskom nivou. Kada dodje do pojave kompletne regeneracije tkiva, nema ni emisije bolnih signala do mozga.

Elektromagnetnim talasima, preko velikih bakarnih elektroda, aparat specifičnim frekventnim impulsima stimuliše direktno bolno mesto i na taj način deluje isceljujuće. To su vibracije sa frekvencijama koju inženjeri biohemije koriste kako bi popravili genetski zapis. Pri tome se intezitet dejstva preko elektroda individualno reguliše tako da bolno mesto samo prijatno bridi.

Specifičan oblik elektrotretmana zasnovan je na modernim naučnim saznanjima. Ovaj tretman se primenjuje kod hroničnih i akutnih bolova. Aplikacijom elektroda na bolno mesto i korišćenjem elektromagnetnih talasa sa specifičnim frekvencijama, ostvaruje se pozitivno dejstvo u smislu smanjenja napetosti mišića, snižavanja bolova kod lumbaga, snižavanja stepena izraženosti hroničnih bolova u leđima i zglobovima.

Bol je zaštitni mehanizam, koji mozgu šalje informaciju da je neki deo tela pretrpeo oštećenje i da ga treba isceliti. Aparati koji deluju na snižavanje stepena ispoljavanja bolnih senzacija koji su na tržištu, zasnovani su uglavnom na TENS tehnologiji/ Transkutana Elektro Stimulacija/ a rade na principu maskiranja bolnog signala u mozgu signalom čula dodira.

Aparat je baziran na patentnoj prijavi kao „Uređaj za radioterapiju živih bića ili delova tela i organa elektromagnetnim poljem“

Ovaj široki spektar informacija baziran na isceljujućim frekvencijama i otvorio je prostor novom načinu isceljenja na bazi genetskog informativnog sistema vibracijama koje se u nauci nazivaju „Transformacija i Čuda -(Popravak DNK)“. Talasi rasterećuju gene od nakupljenog opterećenja iz okoline. Tako se dobrim delom neutrliše započeta degeneracija i ponovo uspostavlja prvobitni zdrav životni sistem na snažnoj osnovi.

MAGIC-GEN pripada novoj generaciji aparata koji direktno utiču na nivou izazivača bola.


Stimulativno dejstvo se ostvaruje aplikacijom bakarnih ili samolepljivih elektroda u trajanju od 20 do 60 minuta na bolno mesto. Pri tome se oseća zaista prijatno delovanje bez bola. Može se koristiti i par puta dnevno dok ne prestane bol ili spazam.

- Nakvasiti jednu stranu obe elektrode i postaviti sa obe strane gde je bolno mesto, obmotati to mesto tako da elektrode dobro prijanjaju ili se nasloniti tj. leći na elektrode ako su u pitanju krsta i leđa
- Podesiti komandu: INTESITY – jačinu na slabo, potenciometrom u levo
- Uključiti aparat prekidačem ON – znak da je aparat uključen je svetljenje lampice sa oznakom: ON
- Podesiti INTESITY – jačinu, potenciometrom u desno dok se ne oseti prijano dejstvo na bolnom mestu. Za to vreme lampica svetli iznad potenciometra (što su jači impulsi, jače svetli lampica, a ako ne svetli elektrode su suve ili su kablovi u prekidu)
- Primenjuje se najmanje 20-30 min, a poželjno je ceo sat ili duže (može i više puta dnevno)
- Primenjivati redovno, svakodnevno par dana duže po prestanku problema

Garancija : 24 meseca Certification: CE Certificat Classification: EU medical products class 1 - EN 60601

www.ibmraz.com

Email: ib.mraz@web.de

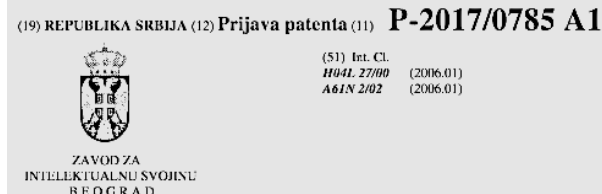

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Aparat **Magic-Gen** sa ugrađenim Li-ion akumulatorima 3 kom. po 3,7V/1Ah certificiran CE
- Niskofrekventni impulsi do 1000 Hz
- Bakarne elektrode ca. 80 x 80 mm
- Mrežni adapter 100-240VAC (50-60Hz) / 15V DC 1,66A certificiran CE i TUV

Ukolika se istroše ugrađeni akumulatori, potrebno je priključiti aparat u struju preko adaptera, 10 sati ili duže dok se ne napune. U aparat su ugrađeni kvalitetni litium-jonski akumulatori sa punjačem za struju te nema dodatnih troškova za baterije.

ISKUSTVA KORISNIKA:

G-din V.M.: "Veoma prijatan osećaj na krstima, pri delovanju preko elektroda preko jedan sat."

G-din C.M.: "Bolovi u krstima od dugog sedenja, nestali su posle primene aparata dva dana od po sat. Tek posle mesec dana se morao postupak ponoviti."

Gospoda B.V.: "Bol u kolenu, samo pola sata držanja elektroda sa obe strane kolena, smanjio se bol a sutradan primećuje da je više ne boli dok se penje stepencama."

G-da A.S. farmaceut: "Uz pomoć ovog aparata „ispravila“ sam staricu J.J./88/, u periodu oko mesec dana redovne primene od jedan sat dnevno. Elektrode su bile postavljane levo i desno od kičmenog stuba i svakodnevnim pomeranjem elektroda od krsta na gore do vrata, oko sat dnevno. **Pacijent: Jelica Jovanovic rodjena 08.08.1928.godine. Godina 88**

Dijagnoza: Ukočenost i kifoza kičmenog stuba, ukočenost nogu

- Kretanje skoro nemoguće...tri meseca nije izašla iz kuce...
- Počela da koristi aparat protiv bolova **MAGIC-GEN electronicstimulation** -proizvodnja Čedomira Mraza
- **Terapija:** Svaki dan aparat jedan sat u isto vreme. 45 dana.Terapiju je sprovodila Ana Stefanović
- Rezultati postignuti kod upotrebe aparata: Posle pet dana javio se osećaj manje ukočenosti i lagane opuštenosti u nogama.
- Kičmeni stub se polako vraća u normalu ...pacijent se lagano ispravlja i pokretljivost raste..
- Posle 15 dana pacijent kreće lagano van kuce...šeta...noge u sve opuštenije...
- Posle 30 dana jos je veća pokretljivost pacijenta i kičmeni stub je više ispravljen
- **45-ti dan pacijent nema bolove i kreće se normalno**

Katarina J., Beograd 42 godine: Diskus herniju između prsljenova L5/S1 i L4/L5 imam već 10 godina. To je razlog česte pojave spazma misica duž leđa. Magic gen aparat mi je dosta pomogao sa ovim spazmima, manje osećam bol i samim tim pokretnija sam i veselija.

Usled sedalnog posla i rada na kompjuteru, kao i genetske predispozicije, imam okostavanje vrata. Često sam imala glavobolje i bol u vratu zbog toga. Redovnim korišćenjem magic gen aparata vrat mi je pokretniji a glavobolje i bol u vratu više nemam.

U školi i vrticu se pojavio rota virus kod dece. Moja deca od 5 i 8 godina su se zalila na jak bol u stomaku,. Stavila sam im magic gen elektrode na stomak. Sami su podesavali jačinu. Rekli su da im jako prija. Posle terapije bilo im je bolje. Jedan sin je sutradan skroz bio zdrav a drugi je trazio jos sutra da mu stavim magicgen na stomak. Posle toga je bio skroz zdrav.

T.M. 50 god. **Magic-Gen** iskustvo: krajem januara pokidala ligament na ruci u tolikom obimu da je lekar pomenuo da će možda morati da se reši operativnim putem. Radila **Magic-Gen** ujutro i uveče po 20 - 30 minuta, 15tak dana, (takodje radila vežbe koje je preporučio terapeut i mazala gavez, uzimala homeopatiju - Ruta, Rhus Tox, Arnica) na kontroli posle 15 dana ligament je zarastao 80% što je fantastičan uspeh i ne može se objasniti drugim sredstvima.

2021 Februar: imala pad prilikom kog se iskrenuo zglob u karlici, posle 3 dana primene **Magic-Gen**, ujutro i uveče, po 1 h. prestali su nepodnošljivi bolovi i mogla samostalno da ode do lekara. Neprekidno radila Magic gen po istoj shemi, ujutro i uveče po 1 h i posle 10tak dana došlo do potpunog oporavka i nestajanja svih bolova što je 4 do 6 puta kraće od predviđanja lekara da će sve proći za oko 2-3 meseca!

Magic-Gen-8 je bioelektromagnetni generator čiji je rad zasnovan na najnovijim naučnim dostignućima ruskog naučnika Garjajeva iz oblasti talasne genetike, a vrši direktnu regeneraciju ćelija bolnog mesta.

Kao talasna genetika se podrazumeva proces, gde se na gene tj. na DNK deluje rezonantnim talasima odnosno određenim elektromagnetskim talasima. Ruski naučnici eksperimentišu sa talasnom genetikom već više od 80 godina. **Njihovo je istraživanje pokazalo da talasna genetika ima potencijal da leči svaku bolest i dramatično produži vek trajanja pojedinih organizama, uključujući i čoveka.**

NAPOMENA: Uredjaji nisu predviđeni za dijagnostiku ili lečenje medicinskih problema. Iznese informacije se ne smeju koristiti kao medicinski saveti. Ne preuzimamo odgovornost ako se aparat ne koristi prema navedenim informacijama.